

ParaSpa[™]Plus

GARANTÍA LIMITADA POR UN AÑO

(Válida únicamente en los EE.UU.)

HoMedics, Inc., garantiza este producto contra defectos en material y mano de obra durante el período de un año a partir de la fecha original de compra con las excepciones que se detallan a continuación.

Esta garantía de producto de HoMedics no cubre daños causados por un uso inadecuado, abuso, accidente, la conexión de accesorios no autorizados, la alteración del producto o cualquier otra condición sin importar cual sea que se encuentre fuera del control de HoMedics.

Esta garantía es válida sólo si el producto es comprado y usado en los EE.UU. Esta garantía no cubre un producto que requiera modificación o alteración para que pueda usarse en cualquier otro país distinto del país por el cual fue diseñado, fabricado, aprobado y/o autorizado, o la reparación de productos dañados a causa de estas modificaciones. HoMedics no será responsable de ningún tipo de daños incidentales, consecuentes o especiales. Todas las garantías implícitas, incluyendo entre otras, aquellas garantías implícitas de idoneidad y comerciabilidad, están limitadas a la duración total de un año a partir de la fecha original de compra.

Para obtener un servicio cubierto por la garantía para su producto HoMedics, puede entregar la unidad personalmente o enviarla por correo junto con su recibo de compra fechado (como prueba de la compra), el franqueo pagado, junto con un cheque o una orden de pago por el monto de \$5.00, pagadero a HoMedics, Inc. para cubrir los gastos de manipulación.

Una vez recibido, HoMedics reparará o reemplazará su producto, según lo que sea apropiado y se lo enviará con el franqueo pagado. Si es apropiado reemplazar su producto, HoMedics lo reemplazará con uno igual o comparable, a opción de HoMedics. La garantía es válida únicamente a través del Centro de servicio HoMedics. El servicio realizado a este producto por cualquier otro diferente al Centro de servicio HoMedics anulará la garantía.

Esta garantía le proporciona derechos legales específicos. Es posible que usted tenga derechos adicionales que pueden variar de un estado a otro. Debido a las regulaciones de los diferentes estados, es posible que algunas de las limitaciones y exclusiones no se apliquen en su caso.

Por más información con respecto a nuestra línea de productos en los EE.UU., visítenos en: www.homedics.com



**Instruction Manual and
Warranty Information**

PAR-70

©2002 HoMedics, Inc. y sus compañías afiliadas, reservados todos los derechos. HoMedics® es una marca registrada de HoMedics Inc. y sus compañías afiliadas. ParaSpa™ y Body Basics™ son marcas registradas de HoMedics, Inc. y sus compañías afiliadas.

Reservados todos los derechos.
IBPAR70-A

1 year
limited warranty

Dirección postal:
HoMedics
Service Center Dept. 168
3000 Pontiac Trail
Commerce Township, MI
48390

Correo electrónico:
cservice@homedics.com

Enjoy warm, soothing relief from muscle tension, and moisturize dry hands.

Thank you for purchasing the HoMedics ParaSpaPlus refreshing home paraffin bath. This, like the entire HoMedics line, is built with high-quality craftsmanship. We hope that you'll find it to be the finest product of its kind.

The ParaSpaPlus paraffin bath turns your home into a salon, providing you with the ultimate experience by helping you to relax, relieve tension and soothe sore muscles.

Relax. Renew. Simplify.

IMPORTANT SAFEGUARDS

WHEN USING ELECTRICAL PRODUCTS, ESPECIALLY WHEN CHILDREN ARE PRESENT, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED, INCLUDING THE FOLLOWING:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.
DANGER—TO REDUCE THE RISK OF ELECTROCUTION:

- Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug it immediately.
- Do not place appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place in or drop into water or other liquid. Store in a cool, dry place.
- Always unplug this appliance from the electrical outlet before cleaning.
- Do not plug or unplug this product when hands are wet.
- Do not use while bathing.

WARNING - TO REDUCE THE RISK OF BURNS, ELECTROCUTION, FIRE OR INJURY TO PERSONS:

- Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children, invalids or disabled persons.
- This product should never be used by any individual suffering from any physical ailment that would limit the user's capacity to operate the controls.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual.

This unit is designed for household use only. This unit is not designed for commercial use. This unit is not a professional device.

- Do not use attachments not recommended by HoMedics, specifically any attachment not provided with the unit.
- Do not operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return it to the HoMedics Service Center for examination and repair.
- Keep cord away from heated surfaces.
- Do not drop or insert any object into any opening.
- Do not carry this appliance by the supply cord or use the cord as a handle.
- Do not use outdoors.
- Do not let cord hang over the edge of table or counter where it can be pulled on by children or tipped over unintentionally.
- Do not place on or near any hot gas, flames, electric element, or in a heated oven.
- Do not operate where aerosol spray products are being used or where oxygen is being administered.
- Never use this product while sleeping or drowsy.
- Never use sharp instruments to remove solidified paraffin wax from the unit.
- Use appliance on a sturdy level surface only.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Caution: Please read all instructions carefully before operating.

SPECIAL WARNINGS:

IF YOU HAVE OR HAVE HAD ANY SKIN CONDITIONS, DISEASES AND OR HEALTH PROBLEMS, YOU SHOULD CONSULT YOUR PHYSICIAN BEFORE USE.

- Do not apply paraffin wax on open cuts or wounds, warts, inflamed skin, or when the sensation of any extremities is decreased.
- Consult your physician if you have any questions or concerns about acute inflammation and peripheral vascular disease or decreased sensation of any extremity before using.
- Do not apply the hot wax near eyes or other heat sensitive areas.
- Discontinue use and consult a physician if the paraffin wax feels too hot or if it does not feel warm enough. This may indicate a possible physical problem.
- Discontinue use and consult your physician if dermatitis, discomfort, irritation, or pain occurs from continued paraffin treatments.
- Test the paraffin wax on the inside of your wrist to make sure the temperature is comfortable.

- Do not overfill the unit and always keep the paraffin wax level about 1.5 inches from the top of the bath.
- Never operate the unit without paraffin wax.
- Do not heat paraffin wax in its plastic packaging, nor heat it over an open flame, on a range, stove or in a microwave.
- Do not pour the melted paraffin wax from the tub/unit.
- Unplug unit before filling with paraffin wax.
- Do not use accessories or wax not recommended or sold by HoMedics.
- If the supply cord is damaged, the entire unit must be replaced by the HoMedics Service Center.
- Do not put water into the tub/unit.


Caution:

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, the plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician.

Therapeutic Benefits

- Paraffin heat therapy seals in heat and contours to the afflicted area for the ultimate moist heat treatment.
- Useful in symptomatic relief of pain caused by arthritis, bursitis, and chronic joint inflammation.
- Relaxes muscles, relieves stiffness and muscle spasms.
- Stimulates circulation.
- Softens and soothes dry, cracked skin.

Figure 1

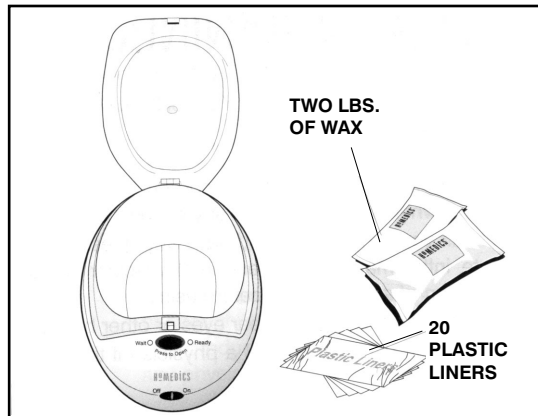


Important Note:

This unit may feel very warm to sensitive skin. However, in order to fully experience the therapeutic benefits of paraffin heat therapy, the wax must be heated to a temperature between 123-131 degrees Fahrenheit. This is the temperature utilized by the leading hospital brand paraffin baths.

For proper application, quickly dip your hand into the melted paraffin wax and remove immediately. This should be repeated 6-10 times. Never soak in the wax for more than 1-2 seconds.

If you are very sensitive to heat or feel that this appliance may not be for you, please return this product to the place of purchase, prior to use.

Figure 2

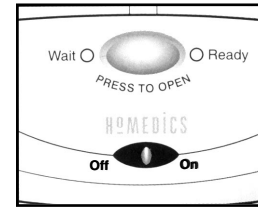

How to Set Up the ParaSpaPlus Unit

1. Remove all contents from packaging and check to make sure you have all of the following components (See Figure 1) of the ParaSpa paraffin bath:
 - Paraffin bath tub
 - 2 lbs. of Paraffin Wax
 - 20 plastic liners
2. Place unit on a level and sturdy table or surface and lift the lid.
3. Make sure ParaSpa tub is empty and clean before putting wax into tub.
4. Open the bags of paraffin wax and place wax in the tub. The unit is designed to hold a maximum of **2.5 lbs.** of paraffin wax and a minimum of 2 lbs. Always keep the level of paraffin wax filled to the "MIN" level marked on the inside of the tub but not over the "MAX" line.
5. Plug the unit into a 110V/120V A/C household outlet.
6. Move the blue button to the "ON" position. The large oval button will glow red. The red light indicates that the melting cycle has started and is not yet ready for use. See Fig. 2. (Approximate melting time is 2 hours).
7. The oval button will change from red to green when the wax is ready to use. Depress the oval button to open the lid. Never dip your hand in the wax until the button has changed from red to green.
8. Move the blue button to the "OFF" position when finished using the unit.

NOTE: NEVER dip your hand into the ParaSpa bath while the LED light is red. This is the melt mode and will be too hot.

ParaSpaPlus™



Figure 3

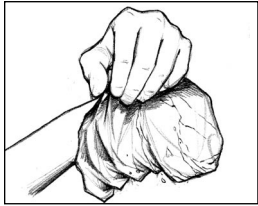


Figure 4

How to Use Paraffin Treatment

1. Before immersing your hand, test the paraffin wax on the inside of your wrist to make sure the temperature of the wax is comfortable. Remove all jewelry before dipping (i.e. rings, bracelets, watch). **NOTE:** It is suggested you wash the area to be treated and apply lanolin-based hand lotion over the area before dipping it into the paraffin wax. This will allow the wax to be removed more easily and will help moisturize the skin.
2. Dip your hand into the melted paraffin wax and remove immediately. Wait a few seconds until the wax solidifies. Try to avoid moving your hand while wax is applied. **NOTE:** Dipping process is quick. Do not leave hand in the tub. Do not soak. Dip quickly in and out.
3. Repeat this step several times until several layers have formed, 6-10 coatings are suggested.
4. For longer heat treatment, place a plastic liner (provided) over the treated area and twist bag at opening. Keep paraffin wax and liner on treated area for 15-30 minutes for ultimate therapy. (See Figure 3)
5. Peel off the wax from the treated area. If using a plastic liner, peel the plastic lining from the area being treated. Paraffin wax will peel off with liner. (See Figure 4)
6. Discard used wax. If you are the only person using the ParaSpa, the wax can be re-used. Simply put it back into the tub to re-melt.

Maintenance

Periodically, the used portion of paraffin wax should be replaced and the unit should be cleaned.

1. Unplug unit, allow paraffin wax to solidify overnight.
2. Push on one end of paraffin wax block. This will tip it up. Lift the block out of the unit and dispose of it. **DO NOT USE SHARP OBJECTS TO REMOVE THE PARAFFIN WAX BLOCK, THIS MAY SCRATCH OR DAMAGE THE TUB.** If the paraffin wax does not remove easily, plug unit in and allow to heat for 10-15 minutes then remove the paraffin wax block and unplug the unit.
3. Wipe the inside of the unit with a disposable towel to remove residual dirt and paraffin.
4. With a damp, soapy cloth, wipe clean. **DO NOT POUR WATER INTO THE UNIT, OR IMMERSE THE UNIT IN WATER.**
5. Store in a cool, dry place. When you are ready to re-use the ParaSpa bath for the next heat treatment, repeat steps 2-7, "How to set up the ParaSpaPlus unit". Then, follow steps 1-6, "How to Use Paraffin Treatment".



ONE YEAR LIMITED WARRANTY

(Valid in USA only)

HoMedics, Inc., guarantees this product free from defects in material and workmanship for a period of one year from the date of original purchase, except as noted below.

This HoMedics product warranty does not cover damage caused by misuse or abuse; accident; the attachment of any unauthorized accessory; alteration to the product; or any other conditions whatsoever that are beyond the control of HoMedics. This warranty is effective only if the product is purchased and operated in the USA. A product that requires modification or adaptation to enable it to operate in any country other than the country for which it was designed, manufactured, approved and/or authorized, or repair of products damaged by these modifications is not covered under warranty. HoMedics shall not be responsible for any type of incidental, consequential or special damages. All implied warranties, including but not limited to those implied warranties of fitness and merchantability, are limited in the total duration of one year from the original purchase date.

To obtain warranty service on your HoMedics product, either hand deliver or mail the unit and your dated sales receipt (as proof of purchase), postpaid, along with check or money order in the amount of \$5.00 payable to HoMedics, Inc. to cover handling.

Upon receipt, HoMedics will repair or replace, as appropriate, your product and return it to you, postpaid. If it is appropriate to replace your product, HoMedics will replace the product with the same product or a comparable product at HoMedics option. Warranty is solely through HoMedics Service Center. Service of this product by anyone other than HoMedics Service Center voids warranty.

This warranty provides you with specific legal rights. You may have additional rights which may vary from state to state. Because of individual state regulations, some of the above limitations and exclusions may not apply to you.

For more information regarding our product line in the USA, please visit:
www.homedics.com

©2002 HoMedics, Inc. and its affiliated companies, all rights reserved. HoMedics® is a registered trademark of HoMedics Inc. and its affiliated companies. ParaSpa™ and Body Basics™ are trademarks of HoMedics Inc. and its affiliated companies.

All rights reserved.
IBPAR70-A

Mail To:
HoMedics
Service Center Dept. 168
3000 Pontiac Trail
Commerce Township, MI
48390

e-mail:
cservice@homedics.com

BAÑO DE PARAFINA **ParaSpaPlus™**



Manual de instrucciones e Información de garantía

PAR-70

1 año de
garantía limitada

Disfrute del alivio tibio y suavizador de su tensión muscular, y humedezca sus manos secas.

Gracias por comprar el refrescante baño de parafina ParaSpaPlus de HoMedics para el hogar. Éste, al igual que todos los productos HoMedics, está fabricado con mano de obra de alta calidad. Esperamos que lo encuentre como el mejor producto de su clase.

El baño de parafina ParaSpaPlus transforma su hogar en un salón, proporcionándole una experiencia muy placentera ayudándole a relajarse, a aliviar su tensión y a suavizar sus músculos adoloridos.

Relájese. Renuévese. Disfrute.

PRECAUCIONES IMPORTANTES

CUANDO UTILICE PRODUCTOS ELÉCTRICOS, ESPECIALMENTE CUANDO ESTÁN NIÑOS PRESENTES, SE DEBEN CUMPLIR CIERTAS PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD, INCLUYENDO LO SIGUIENTE:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO.
PELIGRO—PARA REDUCIR EL RIESGO DE ELECTROCUCIÓN:

- NO intente tomar un artefacto que haya caído al agua. Desconéctelo de inmediato.
- NO coloque el artefacto en donde pueda caerse o ser tirado en una tina o pileta. NO lo coloque ni lo deje caer en agua ni en ningún otro líquido. Guárdelo en un lugar fresco y seco.
- Desconecte SIEMPRE este artefacto de la toma de corriente antes de la limpieza.
- NO enchufe ni desenchufe este artefacto con las manos mojadas.
- NO lo use cuando esté bañándose.

ADVERTENCIA—PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUEMADURAS, ELECTROCUCIÓN, INCENDIO O LESIONES A LAS PERSONAS:

- Se requiere una supervisión estricta cuando este artefacto es usado por, en o cerca de niños, personas minusválidas o incapacitadas.
- Este producto nunca debe ser usado por un individuo que padezca algún trastorno físico que pueda limitar la capacidad del usuario de manejar los controles.
- Utilice este artefacto sólo para el uso para el cual está diseñado y como se describe en este manual.
- NO use accesorios no recomendados por HoMedics, específicamente

Esta unidad está diseñada para uso doméstico exclusivamente. Esta unidad no está diseñada para uso comercial. Esta unidad no es un dispositivo para uso profesional.

ningún accesorio no proporcionado con la unidad.

- NO haga funcionar este artefacto si tiene el cable o enchufe dañado, si no está funcionando adecuadamente, si se cayó o se dañó o si se dejó caer al agua. Envíelo al Centro de servicio de HoMedics para que lo examinen y lo reparen.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- No lo deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura.
- NO lleve este artefacto tomado del cable, ni use el cable como manija.
- No lo use en exteriores.
- NO deje que el cordón quede colgando del borde de una mesa o mostrador donde puede ser halado por un niño o volcado accidentalmente.
- NO lo coloque sobre o cerca de gases calientes, llamas, elementos eléctricos, o en un horno caliente.
- NO lo haga funcionar donde se utilizan productos de rociado por aerosol o donde se está administrando oxígeno.
- NUNCA use este artefacto mientras duerme o si se siente soñoliento.
- No use NUNCA un objeto filoso para retirar la parafina solidificada de esta unidad.
- Use el artefacto únicamente sobre una superficie nivelada y firme.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Precaución: Por favor, lea todas las instrucciones con atención antes de poner en funcionamiento.

ADVERTENCIAS ESPECIALES:

SI USTED PADECE DE CUALQUIER CONDICIÓN DE LA PIEL, ENFERMEDADES O PROBLEMAS DE SALUD, DEBE CONSULTAR A SU MÉDICO ANTES DEL USAR ESTE APARATO.

- NO aplique parafina sobre cortes o heridas abiertas, verrugas, piel inflamada, o cuando la sensibilidad de cualquiera de sus extremidades ha disminuido.
- Consulte con su médico si tiene preguntas o preocupaciones sobre inflamación aguda y enfermedad vascular periférica, o sobre la sensibilidad disminuida de cualquiera de sus extremidades antes de usar este producto.
- NO aplique cera caliente cerca de sus ojos u otras áreas sensibles al calor.
- Suspnda el uso y consulte con su médico si siente la parafina demasiado caliente o si no la siente suficientemente caliente. Esto puede indicar un posible problema físico.
- Suspnda el uso y consulte con su médico si el uso continuo de tratamientos de parafina le produce una dermatitis, incomodidad, irritación, o dolor.
- Pruebe la parafina al interior de su pulso para asegurarse de que la temperatura es confortable.
- NO llene la unidad por encima del nivel y mantenga siempre el nivel de parafina cerca de 1,5 pulgadas (3,8 cm) más abajo del borde del baño.
- No haga funcionar NUNCA la unidad sin la parafina.

- NO caliente la parafina en su empaque de plástico, ni sobre una llama viva, o una estufa, cocina o en un horno de microondas.
- NO vierta la parafina derretida del baño/unidad.
- Desconecte la unidad antes de llenarla con parafina.
- NO use accesorios o parafina no recomendados o proporcionados por HoMedics.
- Si el cordón eléctrico está dañado, toda la unidad debe ser reemplazada por el Centro de Servicio de HoMedics.
- NO ponga agua en el baño/unidad.

Precaución:

Este artefacto tiene un enchufe polarizado (un espigo es más ancho que el otro). Para reducir el riesgo de choque eléctrico, el enchufe está diseñado para encajar en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún así no encaja, póngase en contacto con un electricista calificado.


Beneficios terapéuticos

- La terapia de calor de la parafina sella el calor el interno y envuelve el área adolorida proporcionando el mejor tratamiento de calor y humedad.
- Es útil en el alivio sintomático del dolor causado por el artritis, bursitis, y la inflamación crónica de las articulaciones.
- Relaja los músculos, alivia los espasmos y la rigidez muscular.
- Estimula la circulación.
- Suaviza y alivia la piel seca y rajada.

Figura 1



Figura 2

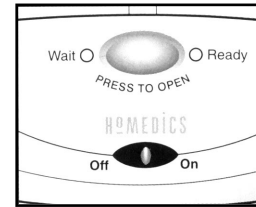

Observación importante:

Este unidad puede ser muy caliente para la piel delicada. Sin embargo, para experimentar en su totalidad los beneficios terapéuticos de la terapia del calor de la parafina, la cera debe calentarse a una temperatura entre 123 y 131 grados Fahrenheit. Esta es la temperatura empleada por los baños de parafina de las marcas hospitalarias más reconocidas.

La aplicación correcta requiere que usted sumerja las manos en la parafina derretida y las retire de inmediato. Esto debería repetirse de 6 a 10 veces. No deje que el remojo en la cera dure más de 1 ó 2 segundos.

Si usted es muy sensible al calor o siente que este artefacto no es para usted, por favor devuélvalo al lugar donde lo ha comprado, antes de usarlo.

Cómo preparar la unidad ParaSpaPlus

1. Retire todo el contenido del empaque y asegúrese de que tiene todos las siguientes partes del baño de parafina ParaSpa (ver Figura 1):
 - Tina del baño de parafina
 - 2 libras de parafina
 - 20 forros de plástico
2. Coloque la unidad en una mesa o superficie firme y nivelada, y levante la tapa.
3. Asegúrese de que la tina del ParaSpa esté vacía y limpia antes de color la cera dentro de la tina.
4. Abra las bolsas de parafina y coloque la parafina en la tina. Este unidad está diseñada para contener un máximo de **2,5** libras de parafina y un mínimo de 2 libras. Mantenga siempre el nivel de parafina por encima del nivel mínimo "MIN" indicado al interior de la tina, pero nunca por encima de línea del máximo "MAX".
5. Enchufe la unidad en un tomacorriente doméstico de 110-120 voltios de C.A.
6. Mueva el botón azul en la posición "ON" (encendido). El botón grande ovalado brillará en color rojo. La luz roja indica que el ciclo de derretido ha empezado y la unidad no está todavía lista para el uso. Ver Fig. 2 (El tiempo aproximado para derretir la cera es de 2 horas).
7. Cuando la cera está lista para el uso, el botón ovalado cambia del color rojo al verde. Para abrir la tapa, oprima el botón ovalado. No sumerja nunca las manos en la cera hasta que el botón ha cambiado del rojo al verde.
8. Cuando ha terminado de usar la unidad, mueva el botón azul a la posición "OFF" (apagado).

ATENCIÓN: NUNCA sumerja su mano en el baño ParaSpa cuando la luz LED es roja. Esta es la modalidad de derretido y es demasiado caliente.



Figura 3

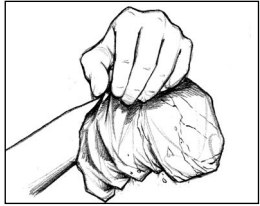


Figura 4

Cómo usar el tratamiento de parafina

1. Antes de sumergir su mano, pruebe la parafina al interior de su pulso para asegurarse de que la temperatura es confortable. Antes de sumergir, retire cualquier joya (por ejemplo, anillos, pulseras, reloj). **ATENCIÓN:** Es aconsejable lavar el área que va a ser tratada y aplicar una loción de manos con base de lanolina antes de sumergirla en la parafina. Esto permite quitar la cera más fácilmente y ayuda a humedecer la piel.
2. Sumerja la mano en parafina derretida y retírela de inmediato. Espere unos segundos hasta que la cera se haya solidificado. Trate de evitar mover la mano mientras está aplicando la cera. **ATENCIÓN:** El proceso de inmersión es rápido. No deje la mano en la tina. No la enjuague. Sumerja rápidamente y retire.
3. Repita este paso varias veces hasta formar varias capas; se aconseja lograr de 6 a 10 capas.
4. Para un tratamiento de calor más largo, coloque un forro de plástico (que se proporciona) sobre el área a tratar y tuerza la abertura del talego. Para lograr la mejor terapia, mantenga la parafina y el forro en el área tratada por 15-30 minutos. (Vea la Figura 3.)
5. Pele la cera del área tratada. Si ha usado un forro de plástico, pele el forro de plástico del área tratada. La parafina se quitará con el forro. (Vea la Figura 4.)
6. Deseche la cera usada. Si usted es la única persona que usa el ParaSpa, la cera puede volver a usarse. Simplemente vuelva a colocarla en la tina y a derretirla.

Mantenimiento

Periódicamente, la cantidad usada de parafina debe ser reemplazada y debe limpiarse la unidad.

1. Desenchufe la unidad, deje que la cera se solidifique hasta el día siguiente.
2. Empuje un extremo del bloque de parafina. Esto hará que sobresalga. Retire el bloque de la unidad y deséchelo. **NO USE OBJETOS FILOSOS PARA QUITAR EL BLOQUE DE PARAFINA, ESTO PUEDE RAYAR O DAÑAR LA TINA.** Si la parafina no sale con facilidad, enchufe la unidad y déjela calentarse por 10-15 minutos, luego retire el bloque de parafina y desenchufe la unidad.
3. Limpie el interior de la unidad con una toalla desechable para quitar los residuos de suciedad y parafina.
4. Termine la limpieza con un paño húmedo y jabonoso. **NO PONGA AGUA EN LA UNIDAD, NI LA SUMERJA EN AGUA.**
5. Guárdela en un lugar fresco y seco. Cuando esté listo para volver a usar el baño ParaSpa para el próximo tratamiento de calor, repita los pasos de 2 a 7, "Cómo preparar la unidad ParaSpaPlus". Luego, siga los pasos de 1 a 6, "Cómo usar el tratamiento de parafina".

BAÑO DE PARAFINA

ParaSpaPlus™

